

男性性功能生物反馈检测仪

0/1 产品功能

1 阴茎硬度检测

适用于心理性或非心理性判断，在睡眠状态下，HOLTER（数据存储记录器）连续记录阴茎勃起次数、持续时间，并能连接主机自动生成相应图表以协助临床医生确定患者勃起障碍的类型。



(NPT记录盒)



(JTN-5001B)

2 敏感阈值检测


主要用于检测早泄，采用超微生物震动波技术，通过对阴茎各部位生物震动感觉阈值测量(Penile Biothesiometer)，定量的评价阴茎等部位感觉神经的敏感程度，评价性相关神经的传导功能和中枢神经对性兴奋的调节性。

0/2 产品特点


- 双通道设计（可以同时检测阴茎头部和阴茎根部变化曲线可以检测阴茎长度的变化值）
- 双模式设计（可以分别日间监测或夜间监测双用标准）
- 一次性神经和肌肉刺激器用体表电极，拒绝交叉感染
- 记录盒采用充电式设计，方便客户重复使用
- 多种功能组合，适用于不同的临床需求
- 电脑自动识别临床结论，并打印报告



(JTN-5004)

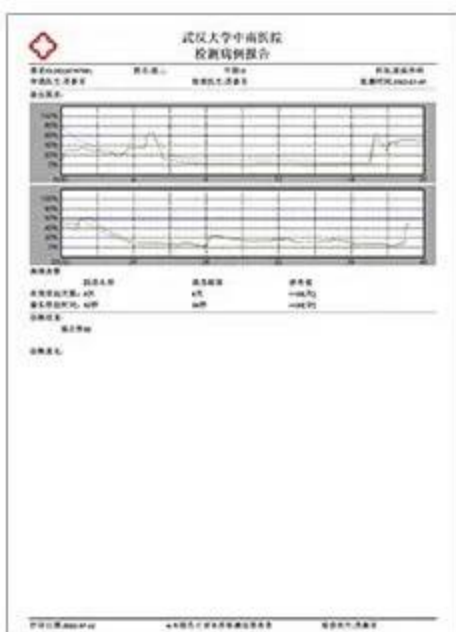

(阴茎勃起硬度报告)

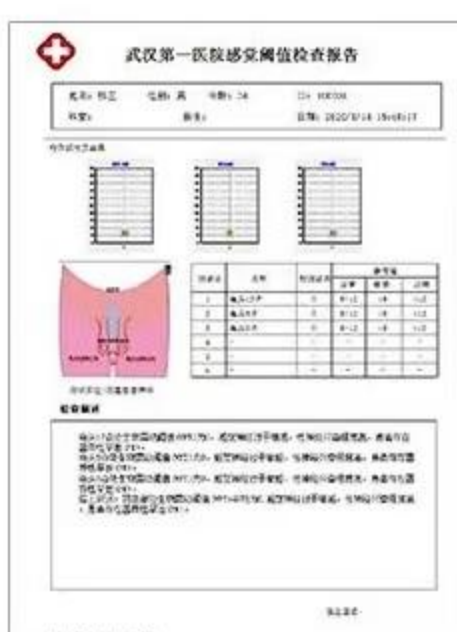

(敏感阈值检测报告)